



# LENSÓMETRO AUTOMÁTICO

▶ SK-1000 A/B

# LENSÓMETRO AUTOMÁTICO MULTIFUNCIONAL

REDEFINIENDO  
LA FUNCIONALIDAD  
COMPLETA MÁS FÁCIL  
DE OPERAR

**sun** SK MED  
Kingdom CheongQing Sunkingdom Medical Instrument Co., Ltd.



## LENSÓMETRO AUTOMÁTICO

SK-1000A/B



*PRECISIÓN  
SIMPLICIDAD  
COMODIDAD*

“Buscando la  
máxima conveniencia  
y precisión”

**LENSÓMETRO AUTOMÁTICO  
SK-1000A/B**

## DISEÑO EXQUISITO

Solo pesa 5kg, cuerpo suave y curvo, color marfil clásico

## PANTALLA TÁCTIL

Pantalla LCD HD de 7 pulgadas para una visualización más detallada. Diseño de pantalla táctil confortable para una operación suave.



## Rápido

Mayor capacidad de procesamiento de imágenes. Velocidad de operación más alta, más de 15 cuadros/ms.

## Fluido

Seguimiento del cursor más suave. Enlace lineal con el monitor. Excelente precisión y velocidad de medición.

### · Identificación automática de lentes


En modo de medición automática, el modo puede cambiarse automáticamente según el tipo específico de lente.

### · Medición de PD y PH

Con el deslizador nasal móvil y el sensor, la PD (distancia pupilar) y la PH (altura pupilar) pueden generarse automáticamente, lo que resulta más conveniente y rápido.

### · Medición de transmitancia

Se puede medir simultáneamente la transmitancia de luz azul, luz visible y UV, permitiendo recomendar gafas de sol con intensidad de color cuantificada.

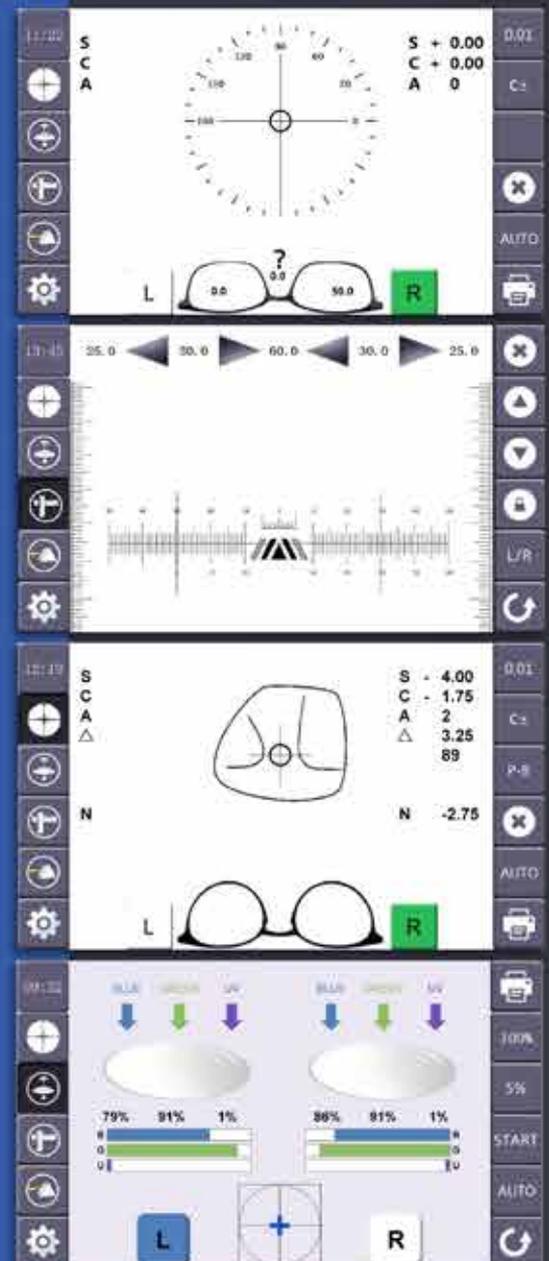

	SK-1000A	SK-1000B
Rango de medición	Esfera	-25.00 ~ +25.00D (0.01/0.06/0.12/0.25D)
	Grado De Cilindro	0.00 ~ ±10.00D (0.01/0.06/0.12/0.25D)
	Eje Del Cilindro	0°~180° ( 1°)
	Grado De Adición	0.00 ~ +10.00D (0.01/0.06/0.12/0.25D)
	Grado De Prisma	0.00° ~15.00° (0.01/0.06/0.12/0.25D)
Lentes medibles	Lentes ópticos simples/dobles	
	Lentes multifocales progresivos	
	Lentes de sol (para medición de transmitancia).	
Medición de prisma	Coordenadas polares/coordenadas rectangulares	
Medición de PD	20.0mm to 48.0mm PD monocular (distancia pupilar de un solo lente)	
Transmitancia UV	Compatible	Compatible
Transmitancia de luz azul	Compatible	Compatible
Transmitancia de luz visible	/	Compatible
Impresora	Impresora termal	
	Corte de papel manual/corte de papel automático	
	Papel de impresión 58mmx25mm	
Fuente de energía	Generador principal: DC 5V	
	Adaptador: entrada AC 110 V-240V, 50 Hz-60Hz	
Energía	30 VA	
Tamaño	255mmx210mmx430mm	
Peso	Alrededor de 5kg	



ChongQing Sunkingdom Medical Instrument Co., Ltd.

**TECNOIMAGEN**

[www.tecnoimagen.com.ar](http://www.tecnoimagen.com.ar) | 11-4582-2222